


Date d'édition : 21.06.2026

Ref : 5558711

Support pour tube de Franck-Hertz au néon monté sur  
une plaque pour tube néon 555 8801

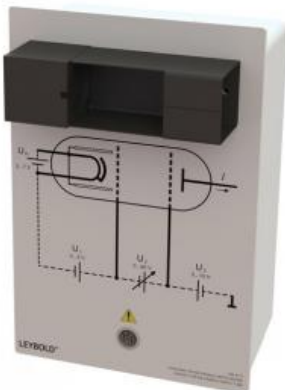

Sur plaque d'expérimentation, qui peut être utilisée aussi bien comme appareil de table que dans un cadre d'expérimentation de démonstration.

Caractéristiques techniques:

Raccordement pour appareillage Franck-Hertz (555 8801):


DIN femelle (câble de raccordement 555 872 supplémentaire nécessaire)

Dimensions : 20 cm x 29,7 cm x 17 cm

## Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Optique > Sources lumineuses et accessoires > Laser

Sciences > Physique > Produits > Physique atomique et nucléaire > Expériences de Franck et Hertz > Néon

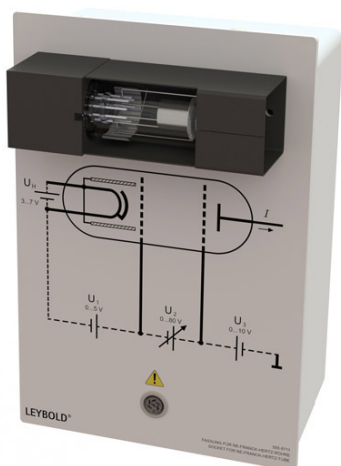

## Options

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[leybold-didactiques.fr](http://leybold-didactiques.fr)



Date d'édition : 21.06.2026

**Ref : 5558701**

**Tube de Franck-Hertz au néon pour support de tube 555 8711**



Pour mettre en évidence l'émission d'énergie discontinue d'électrons libres par collision avec des atomes de néon et leurs états d'énergie discrets ou pour déterminer la première énergie d'excitation. Utilisé avec l'alimentation Franck-Hertz (555 8801), on obtient une courbe de Franck et Hertz que l'on peut relever soit manuellement, soit à l'aide d'un oscilloscope, d'un enregistreur XY ou encore avec le système CASSY. Le tube de Franck-Hertz au néon doit être utilisé à température ambiante. La désexcitation des atomes de néon est en partie effectuée par des passages au domaine du visible. Suivant le degré d'excitation, il est ainsi aussi possible d'observer des couches lumineuses.

Caractéristiques techniques :

Tension de chauffage : ~4 V/0,6 A

Grille de commande : 0 ... 5 V -

Tension d'accélération : 0 ... 80 V -

Tension inverse : 0 ... 10 V -

Charge de néon : env. 10 hPa

Énergie d'excitation des atomes de Ne : 16 ... 18 eV

Utilisation à température ambiante

**Ref : 555872**

**Câble blindé avec connecteurs DIN pour tube de Franck-Hertz au néon et alimentation**

pour tube Franck Hertz 555 871/5558711 et Alimentation 555880 / 5558801





Date d'édition : 21.06.2026

**Ref : 5558801**

**Alimentation Franck-Hertz pour tube au mercure ou au néon**



Sert à réaliser l'expérience de Franck et Hertz avec le tube au mercure ( 555 854 ) ou le tube au néon ( 555 8701 ) :

Fonctionnement manuel,  
avec un oscilloscope,  
avec CASSY ou un enregistreur

Sorties pour toutes les tensions d'alimentation, entrée avec amplificateur pour le courant du collecteur, schéma électrique sérigraphié ; possibilité de raccordement d'une sonde NiCr-Ni pour la régulation de la température du four pour tube Hg.

Affichage numérique et possibilité de sortie analogique de toutes les valeurs.

Caractéristiques techniques :

Chauffage de la cathode : 3 ... 8 V-

Tension de commande : 0 ... 5 V-

Tensions d'accélération : 0 ... 30 V- (Hg), 0 ... 80 V- (Ne)

Modes de fonctionnement : dents de scie (20 Hz env.) rampe (10 s env.) manuel

Tension inverse : 0 ... 10 V-

Branchement des tubes : douille DIN

Température de consigne : 140 °C ... 220 °C

Raccord pour la mesure de la température : douille DIN pour sonde Ni-Cr-Ni, 1,5 mm (666 193)

Branchement du four : douilles de sécurité de 4 mm

Alimentation : 115/230 V, 50/60 Hz

Dimensions : 30 cm x 21 cm x 23 cm

Masse : 2,9 kg